

邀请函|品牌赞助商——悦为（山东）生物科技有限公司与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号：E30

悦为（山东）生物科技有限公司



品牌介绍

悦为生物十多年来公司一直以“专业服务客户”为宗旨，凭借自身技术力量和良好的服务质量，致力于为国内生命科学科研和生物医药研发客户提供最前沿的技术设备、试剂耗材及技术服务产品。

公司管理层来自世界 500 强头部企业，在本行业已深耕 20 多年，具有丰富的运营和管理经验。公司管理规范，薪酬管理完善。

目前公司业务范围已覆盖整个山东市场，设有济南、青岛两个办事处，主攻生命科学和生物医药两大主要市场，客户范围涉及高等院校、研究所、研发企业、大中型制药企业和政府平台等。

公司代理的仪器品牌和产品主要有：e-BLOT 电子压片化学发光成像仪、杰莱美荧光定量 PCR 仪/考种仪、Wyatt 怀雅特光散射检测器/场流分离系统、层浪生物分析型流式细胞仪、纬冉科技分选型流式细胞仪/纳米流式细胞仪、苏州赛谱蛋白纯化层析仪/核酸合成仪、瑞士比欧/上海百仑生物反应器、英国 Ruskin 厌氧/低氧工作站、朗卓的研磨仪和楚天源创的谐波挤压泵（匀流泵）等。试剂耗材以层析空柱、预装柱和蛋白纯化填料等产品为主。同时公司与 Thermofisher、GE、Agilent、Waters、Sartorius 和 Biorad 等国际知名品牌亦建立了长期的合作关系。

我们专注于为客户提供高性价比产品和专业技术解决方案，期待与广大客户进行深入交流合作，共同开创未来！

产品推荐

01e-BLOT 电子压片化学发光成像仪



▶▶ 灵敏度比冷 CCD 高 2 个数量级

▶▶ 超过 95% 的样品在 1 秒内成像

▶▶ 定量范围比冷 CCD 高 2 个数量级

▶▶ 空间节省超 90%

02


层浪 FongCyte 流式细胞仪——标配自动进样器



- ▶▶ 智能化分析型中高端流式细胞仪
- ▶▶ 一键开关机，液路维护无需人工
- ▶▶ 带有半导体 TEC 温控的固态激光器，避免温度波动引起的能量和光斑漂移
- ▶▶ 带有半导体 TEC 温控的 APD 检测器，无惧温度波动造成的负面影响，具有优良的量子效率和检测灵敏度
- ▶▶ 软件支持边采集边分析
- ▶▶ 可以从 1 激光到 3 激光，最多可以配置 3 激光 14 色

03

上海纬冉分选型流式细胞仪

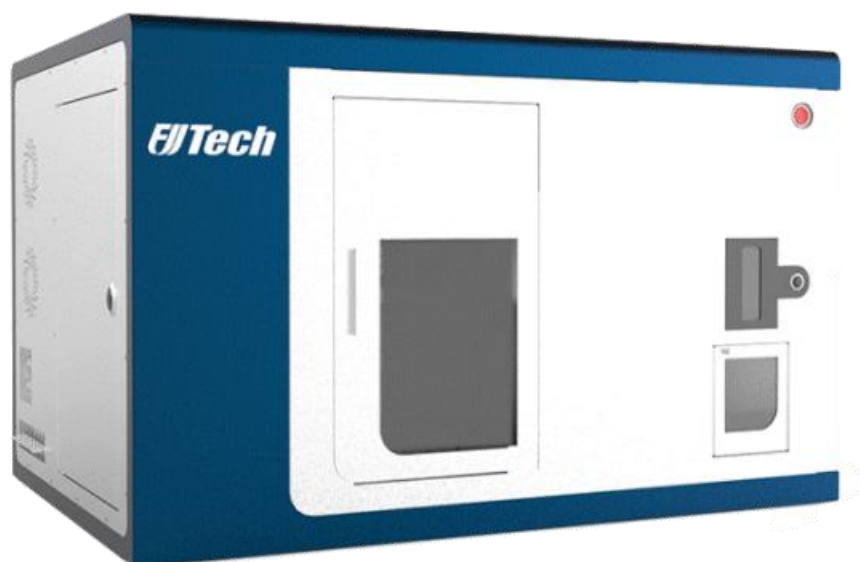

可配置高达 4 激光 18 路荧光通道的光学检测和 4 种不同规格的细胞分选喷嘴

可同时支持高达 4 路目标细胞的分选

支持流式管、离心管和微孔板等多种类型容器的收集

支持样品和分选容器温度控制

04

杰莱美实时荧光定量 PCR 仪



高精度的温度传感及控制系统:温度测量精度可达到 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$, 先进的 PID 温控算法可实现 $8.4^{\circ}\text{C}/\text{S}$ 升温速度的同时确保超调不超 0.1°C 、准确性 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ 、精度优于 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 的出众温控性能;

通道: 1-6 通道灵活选配, 最高可实现六重荧光检测;

专业布局的高精密光学系统, 灵敏度高, 孔间均一性好, 数据质量比肩进口设备;

方便易用的操作体验, 软件功能强大, 独有 KASP SNP 基因分型模块, 具有实验结束后自动关机功能, 并发送数据至指定邮箱;

可升级的无限远光路系统: 增加或减少滤光片对光路路线没有任何影响, 仪器只需增加或减少滤块就能实现荧光通道的增减, 可根据用户需求灵活升级。厂家备有滤块库, 质保期内用户可随时申请更换自己需要的滤块。

05

苏州赛谱实验室型蛋白层析纯化系统



- 》直观而又灵活的蛋白纯化系统，可以快速实现生物样品的纯化
- 》模块式的结构，使得它具有更强的扩展性和高效性，轻松实现您的专属定制

06


楚天源创谐波挤压泵（匀流泵）

流态均匀稳定，剪切力低，
安全性高，不会超压损坏
自关断，防虹吸，防自流
流量精度高，可正反输送

- 》摩擦程度极低，管内壁析出物极少，泵管寿命超长
- 》卫生等级高，符合 GMP 标准
- 》运行 60 小时后颗粒对比



UFP020SU

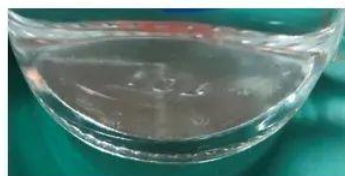

无明显颗粒



某蠕动泵



颗粒堆积明显

应用场景	描述
分装	装量准确，误差 $\leq 2\%$ ，连续灌装不衰减，瓶与瓶之间的装量差别小于千分之五
超滤和层析	无脉冲、可自带压力传感器、流速稳定
药品生产	卫生级别高，材质符合 GMP
转移细胞	极低的剪切力，不会伤害细胞
转移病毒	可 SIP 蒸汽在线灭菌，可用于传输无菌样品
血液透析	蠕动可更换，防止交叉污染，无磨损脱落
输送有毒有害液体	蠕动化学抗性好，密闭操作
输送颗粒性物质(如层析介质)	无磨损
更强耐用性	替代传统蠕动泵和隔膜泵

悦为（山东）生物科技有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「E30」洽谈、合作

联系方式

悦为（山东）生物科技有限公司

地址：济南市市中区二环南路 3377 号凯瑞大厦 12 层

电话：0531-82076781

网址：yuebio.cn

邮箱: jnjoyway@163.com



参观预登记小程序