

邀请函|品牌赞助商——菲斯福仪器（河北）有限公司与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会




展位号：D26/28

菲斯福仪器（河北）有限公司

品牌介绍

菲斯福仪器（河北）有限公司（原黄骅菲斯福实验仪器有限公司）创立于2011年。主要生产实验室设备及医疗器械，产品在国内外科研院所及大学实验室得到广泛应用。经过十年的发展，公司已成为集研发、生产、销售为一体的集团化高新技术企业，并拥有自己的品牌——FAITHFUL。总投资1.2亿元的新厂区，标准厂房20000平方米，员工100余人，年产各系列成品三万多台，可实现年产值1亿元，并实现出口创汇1000万美元。公司已通过ISO9001质量体系认证和欧盟CE认证。主要产品包括：干燥箱，培养箱，摇床，净化工作台，人工气候箱，恒温恒湿箱，生化培养箱（BOD实验箱），陶瓷纤维马弗炉，水浴锅，水箱，加热板，磁力搅拌器，电热套，自控蒸馏水器等。我们在积极开发国内市场的同时，更致力于国际市场的开拓。目前有一百多个代理商遍布世界各地，包括德国，法国，波兰，俄罗斯，荷兰，土耳其，日本，韩国，马来西亚，美国，墨西哥，伊拉克等。公司以“务实创新 诚信为本”为宗旨，以品质管理为基石，并结合现代化的管理、先进的主流工艺、一流的技术力量致力于打造具有国际竞争力的品牌。

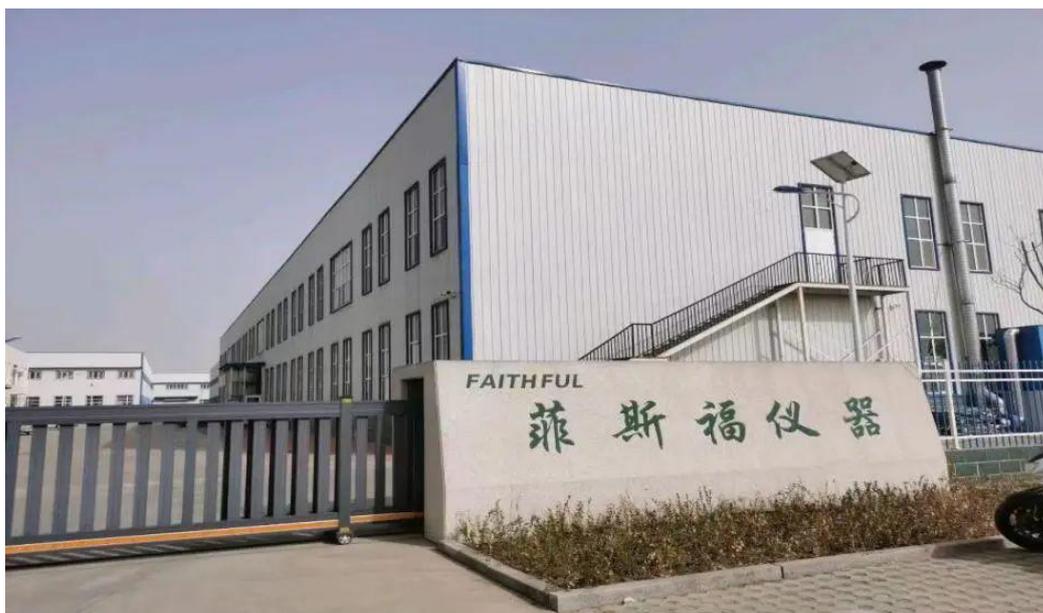

产品推荐

电热鼓风干燥箱



产品名称	电热鼓风干燥箱
产品特点	<ol style="list-style-type: none"> 1、立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室温度分布均匀。 2、数码管显示微电脑智能 PID 控温仪。 3、标配风机开关、高亮 LED 仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。 4、新型防烫手把手。 5、控温仪彩色液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。 6、4 档 3 速调速式风机，可根据用户不同的实验要求，调节所需的风量，从而对各类样品进行烘干。 7、独立超温保护系统：当工作室温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路，提高安全性。 8、独立限温器：高精度数显式独立限温器，设定好工作室限制温度，为产品提供双重安全保障。
应用范围	干燥、烘焙、熔蜡、热处理之用。

生化培养箱、冷藏培养箱、BOD 培养箱

产品名称	生化培养箱、冷藏培养箱、BOD 培养箱
产品特点	1. 独特内部风循环结构设计，风机微风循环，使工作室内温度分布均匀。 2. 双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封性好。 3. 彩屏液晶 30 段程序控温仪，智能化霜功能保证设备长期稳定无霜运行，标配电子式独立限温器，双层保护实验安全。
应用范围	各种恒温实验及环境试验，水分析、BOD/细菌霉菌微生物培养、植物育种栽培、样品保存。

人工气候箱



产品名称	人工气候箱
产品特点	1. 双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，门装控制器，控制面板采用 7.0 寸彩色液晶触摸屏。光照多级可调，并可实现 30 段温度、湿度、光照

	<p>度参数的自由组合编程运行。 温度、湿度历史数据曲线查询。具有 U 盘数据储存导出，预约开关机功能。（远程控制可选配）</p> <p>2. 采用光照普 LED 光源顶部光照设计，层与层间光照干扰小，具有光照度高、热辐射小和超长实用寿命的特点，隔板可移动，层间距可调节。</p> <p>3. 内置加湿系统，加湿颗粒小温度均匀度好，耗水量低，具有自动进水，缺水报警功能。平衡式温度控制方式，采用回流阀及膨胀阀控制蒸发器温度，避免压缩机频繁启动，延长压缩机使用寿命</p>
应用领域	精确湿度控制下的微生物、细胞组织、育苗、昆虫、小动物的光照培养。

恒温培养摇床




产品名称	恒温培养摇床
产品特点	<p>1、大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，操作简便。</p> <p>2、采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转。</p> <p>3、工作室内部独特风道微风循环，温度均匀性好；大观察视窗设计，便于观察样品，启闭方便。</p> <p>4、转速控制：直流无刷电机智能反馈控制，转速精度高。慢启动设计，转速失控后，自动锁定，启动速度可调，防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅，有效保证了定量实验的准确性。</p> <p>5. 开盖自动切断 UV 灯功能。</p> <p>6. 工作室底部具有防水功能，溶液洒落不会影响机器正常运行。</p>
应用领域	小型台式恒温振荡培养设备

陶瓷纤维马弗炉



产品名称	陶瓷纤维马弗炉
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> ● 全镜面不锈钢炉口，长期使用不变色。 ● 进口双保温陶瓷内胆，性能稳定。 ● 真空成型多晶莫来石纤维炉膛，高效保温。 ● 高精度微电脑控制仪与精密传感器完美结合，温度精确。 ● 双壳体中空气套隔热，双导风通道，确保通风良好，外壳温升低。 ● 进口控温仪及高精度传感器，响应敏感，控温精度高，稳定性好。 ● 增加排气装置，利于灰化。 ● 分体式设计，电路可拆卸，便与维修和保养。 ● P 型号为日本富士程序控温型，多段可编程控制，简化了实验过程，实现自动控制和运行。
应用领域	精确控制的 1200℃ 以内烧结、融化、元素分析、物理测定

新款陶瓷搅拌器

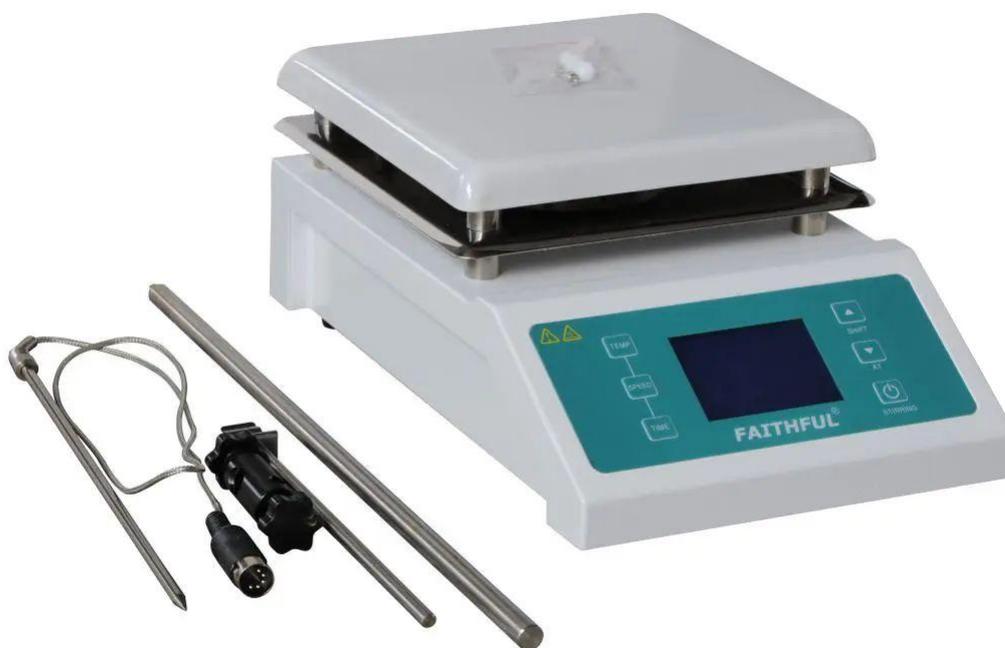

产品名称	新款陶瓷搅拌器
产品特点	<ol style="list-style-type: none">1、外壳与上盖采用拉伸工艺，有效地防止渗漏。2、加热和搅拌同时进行，全封闭加热盘，无明火，升温快，耐用性强。3、可精确设置温度和搅拌速度，搅拌速度无级可调。带速度运行开关，可随时开启或终止搅拌功能。4、带定时功能，0-9999分钟，可按照客户要求设定时间，带声光报警功能。5、内外置双传感器，外置 PT100 传感器可精确控制被加热液体温度，内置 K 型传感器可控制加热板的温度。6、一键转换内外置传感器，便捷操作，精确控制。7、超大屏幕显示屏，可同时显示温度，转速以及定时时间
应用范围	带加热的磁力搅拌陶瓷设备

数字控温磁力搅拌电热套



产品名称	数字控温磁力搅拌电热套
产品特点	PID 单数码温度控制器，数字显示并具有搅拌功能 加热和磁力搅拌可同时进行，并具有无极可调功能 PT100 温度传感器，装配可调式传感器支架
应用范围	最高到 450℃ 的通用加热设备

电热恒温水浴锅



产品名称	电热恒温水浴锅
产品特点	1、内胆、上盖采用优质不锈钢拉伸工艺加工，表面经防腐工艺处理。 2、增加放水开关，一键式操作，放水方便。 3、防干烧（缺水断电）功能，确保产品安全运行。
应用范围	精密恒温、辅助加热之用

菲斯福仪器（河北）有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会
暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「D26/28」洽谈、合作

联系方式

菲斯福仪器（河北）有限公司

地址：河北省黄骅市城东开发区 26 号菲斯福科技园

销售热线：0086-317-5328349 0086-317-5337349

邮箱 1: info@labinstrument.cn

网址: www.labinstrument.cn



FAITHFUL®

菲斯福仪器（河北）有限公司
诚邀您莅临参观

展位号D26/28



参观预登记小程序