

邀请函|品牌赞助商——**山海天（苏州）科技有限公司**与
您相约**青岛市分析测试学会年会暨展会**



展位号：B21

山海天（苏州）科技有限公司



山海天(苏州)科技有限公司

品牌介绍


山海天（苏州）科技有限公司于 2021 年注册于苏州工业园区，是一家以生命科学为基础研究，并提供全方位产品的技术型生产企业。我们秉持“自主创新，持续改进，贴心服务”的理念，为客户提供更优质的产品。


公司致力于不断提高自身专业知识，竭力创新产品，专注于细胞培养、液体处理过程中的生物耗材和实验仪器等产品的研发与生产。公司逐步完善的销售网络和售后服务，是缩短企业和客户之间距离的强力保障，我们目前有华中，华北，华南三个保障中心，能快速响应客户需求。我们已通过 ISO9001:2015、CE 欧盟认证、ISO13485:2016 等质量体系认证，是国内先进的生产制造商。提高中国制造的竞争力，推动进口替代的进程，打造优秀民族品牌是我们的目标。


产品推荐

耗材系列

耗材产品的品种数量高达 155 个

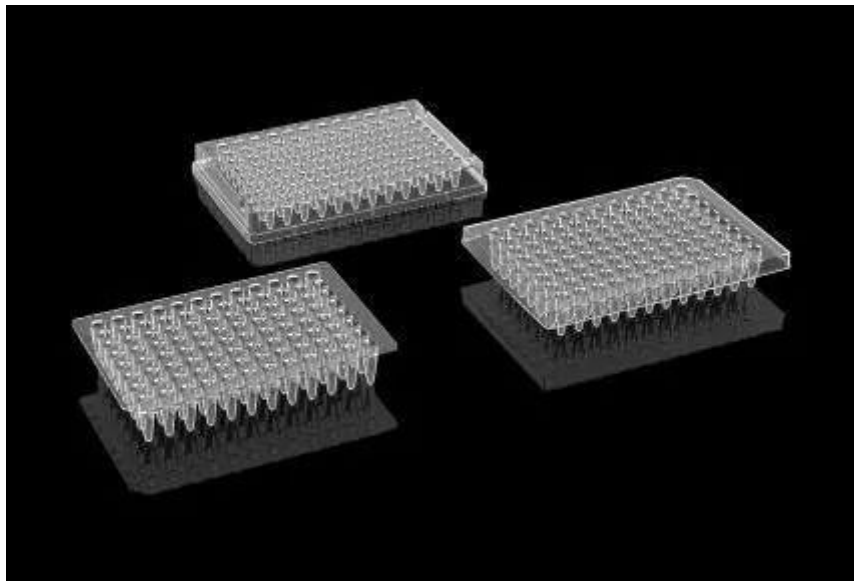

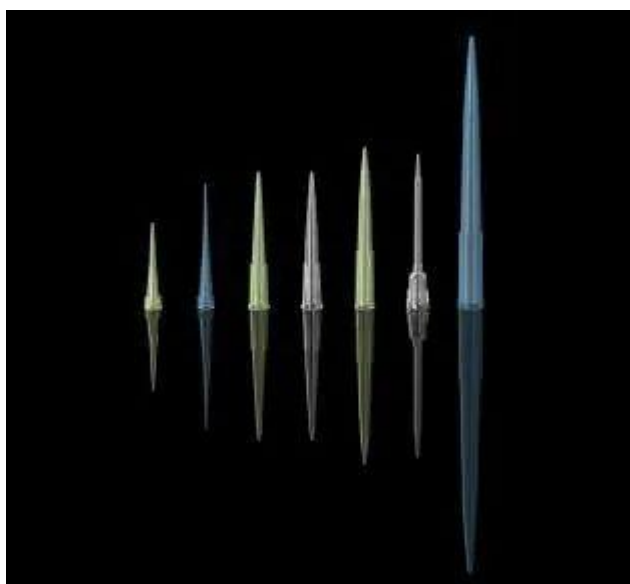

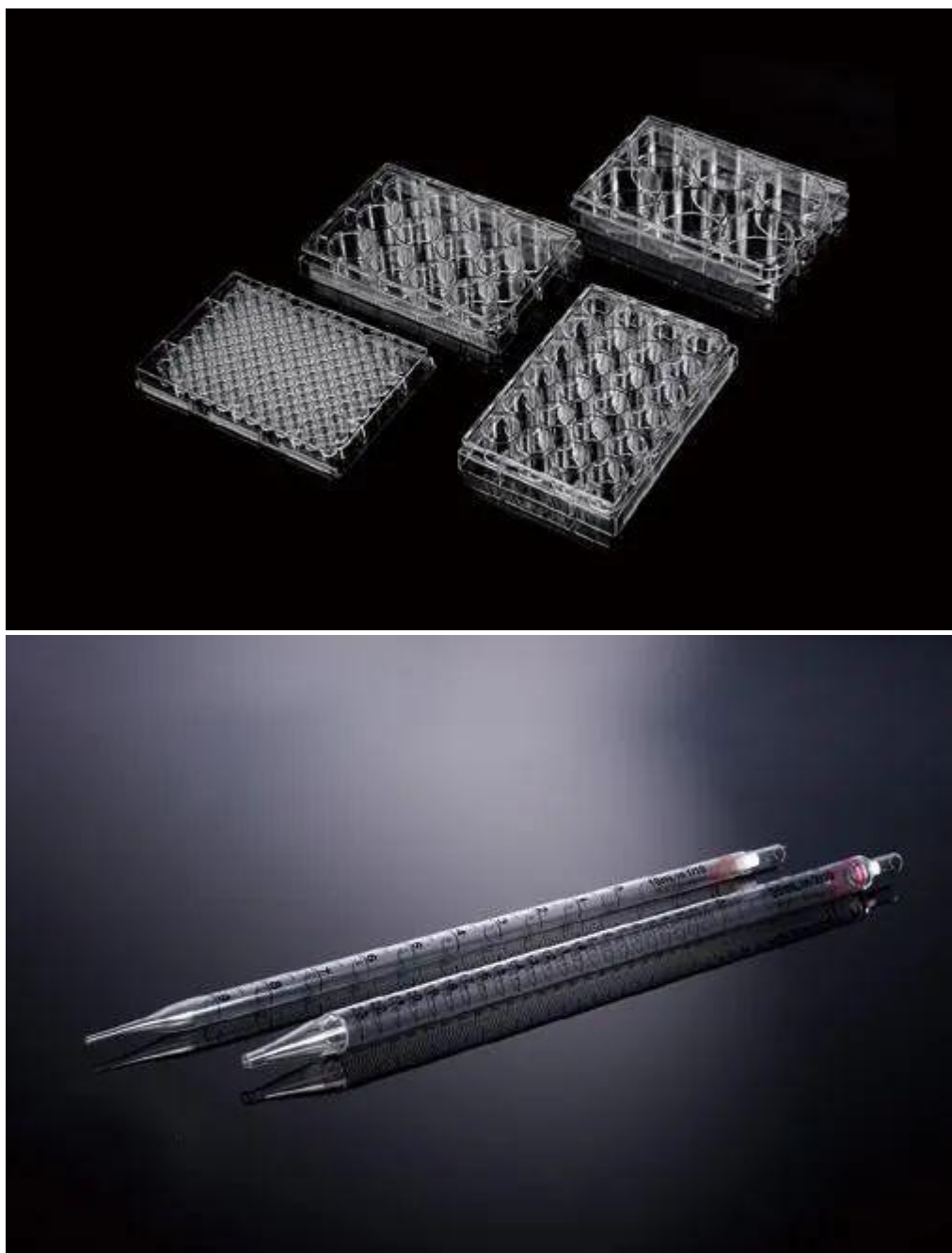

耗材品类有：PCR 系列耗材，吸头系列耗材，离心管系列耗材，深孔板，移液管，细胞培养板，酶标板。耗材运用的都是医疗级聚丙烯（PP）材质，拥有十万级标准洁净生产车间。耗材均为消毒处理，无菌无酶无 PCR 抑制物。符合 SBS 标准。已通过 ISO9001:2015、CE 欧盟认证、

ISO13485:2016 等质量体系认证，是完美的进口替代。

仪器系列（共五个系列）



离心机是利用转子在高速旋转时所产生的离心力的作用，对液体样品中的各种物质颗粒进行分离，浓缩和提纯。可用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开。将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开。可用于排除湿固体中的液体。利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点，对固体颗粒按密度或粒度进行分级。

根据转速和性能特点分为以下四个品类：低速离心机；低速冷冻离心机；高速离心机；高速冷冻离心机。低速离心机系列四款，高速离心机系列五款。



TC6050 低速离心机主要用于细菌、病毒分离、核酸分离、梯度密度离心、血液分离、临床检验样品处理。仪器配有多种转子和多种适配器选择，适用于常用的离心管、真空采血管等。气密性转头，对于危险样品离心，如病毒、血液样品、病原菌等易形成气溶胶的生物样品更具备独特优势。转头自动识别和失衡检测，可确保离心安全。离心腔体采用特氟龙涂层可抵御腐蚀性较强的样品离心。外置 USB2.0 接口方便系统升级、实验数据下载。最大容量可达 1000ml，最大相对离心力 5000xg，转速可达 6000rpm。



TC6050R 低速冷冻离心机主要用于细菌、病毒分离、核酸分离、梯度密度离心、血液分离、临床检验样品处理。仪器是电吸式双门锁设计，轻轻一按即可快速关闭门盖，安静更安全。30 条自定义存储程序，5 个面板上快捷存储程序调用，方便快捷。进口制冷压缩机组 R134a 环保制冷剂，PID 数字控温，制冷效果更快、更精准，在最高转速下，仍能保持样本在 4° C。面板上独立 Pre-Cooling 快速预制冷功能，在室温环境下可用极短的时间达到 4° C。离心腔体采用特氟龙涂层可抵御腐蚀性较强的样品离心。最大容量可达 1000ml，最大相对离心力 5000xg，转速可达 6000rpm。



TC2028R 高速冷冻离心机 兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点，采用创新的控制技术、质量可靠、性能优越，广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验的常规分析。仪器是电吸式双门锁设计，轻轻一按即可快速关闭门盖，安静更安全。30 条自定义存储程序，5 个面板上快捷存储程序可调用，方便快捷。进口制冷压缩机组 R134a 环保制冷剂，PID 数字控温，制冷效果更快、更精准，在最高转速下，仍能保持样本在 4° C。面板上独立 Pre-Cooling 快速预制冷功能，在室温环境下可用极短的时间达到 4° C。离心腔体采用特氟龙涂层可抵御腐蚀性较强的

样品离心。最大容量可达 400ml，最大相对离心力可达 28000xg，转速可达 20000rpm。



TC1824 高速离心机兼具强大的功能、高度的通用性、简便的操作性等优点，采用创新的控制技术质量可靠、性能优越，广泛用于医学临床生化、血液学、免疫学及临床科研和分子生物学研究以及工业实验室的常规分析。离心腔体采用特氟龙涂层可抵御腐蚀性较强的样品离心。10 条自定义存储程序，5 个面板上快捷存储程序调用，方便快捷。电吸式双门锁设计，轻轻一按即可快速关闭门盖，安静更安全。最大容量可达 400ml，最大相对离心力可达 24000xg，转速可达 18000rpm。

涡旋混合器系列



S6 采用先进的设计理念和制造技术，外形简洁流畅美观，结构紧凑牢固，使得该机型具备高度的通用性、简便的操作性等优点，确保其能快速的处理液体、液固、粉末等物质的混合。ST 智能分析处理平台能够灵敏反应各种模式工作要求，全面搭载快速处理芯片组及电子传感技术，轻松实现对转速，时间及工作模式的智能控制。两种安全操作模式“点动”、“连续”，切换方便简单，时间功能具备正计时及倒计时让实验更方便准确无误。转速范围可达 3000rpm。

迷你离心机系列



Mini05G 迷你离心机采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑稳固，秉承高度的通用性、简便的操作性等优点，同时具备“平稳启动”和“平稳制动”功能特性的离心机；该款迷你离心机非常适用于微管过滤及快速离心、微量血细胞分离、微生物样品处理、PCR 实验分区离心、防止离心管中液体挂壁等现象，是处理小量离心样品的首选。采用高效直流永磁电机，RSS 材质减震，运行更平稳，旋转空间为 360° 圆弧，无夹角、风阻小、温升小、超静音，整机噪音 $\leq 43\text{dB}$ ，转速范围可达 10000rpm。

微孔板离心机系列



HKB-H 微孔板离心机采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑稳固，秉承高度的通用性、简便的操作性等优点，同时具备“平稳启动”和“平稳制动”功能。适用于 96 孔或 384 孔及小容量微孔板，同样适用带裙边、不带裙边及各种标准 PCR 微孔板。门盖保护、超速和不平衡探测系统可以对离心过程实时监控，确保仪

器安全运行。运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD 显示结果代码。最高转速可达 3000rpm。

山海天（苏州）科技有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「B21」洽谈、合作

联系方式

山海天（苏州）科技有限公司

服务热线：400-0512189

电话：0512-65110663

地址：苏州市工业园区江浦路 41 号 3 幢 3201 室

网站：www.sht-bio.com



扫一扫，了解更多信息



参观预登记小程序