

邀请函|品牌赞助商——滕州瑞普分析仪器有限公司 与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: A26


滕州瑞普分析仪器有限公司

品牌介绍

滕州瑞普分析仪器有限公司是专业从事气相色谱仪、液相色谱仪、气体发生器、色谱工作站、实验室分析仪器及相关产品的研发、生产、销售于一体的 3A 级信用企业。

公司拥有专业的色谱分析专家、专业的生产管理人员、试验人员以及完备独立的分析实验室，长期致力于色谱分析方法的创建、应用与推广，为用户提供色谱检测系统的整体解决方案。对客户的各种疑难问题进行理论分析和解答，帮助客户建立合适的分析方法及仪器的配备。

产品广泛应用于卫生防疫、食品卫生、环境检测、质量监督、石油化工、精细化工、农药、制药、电力、白酒、矿山等行业及科研机关和大专院校。公司拥有一套完善合理的售后服务体系，服务队伍本着快速、高效和精益求精的精神随时为广大客户提供完美的服务。

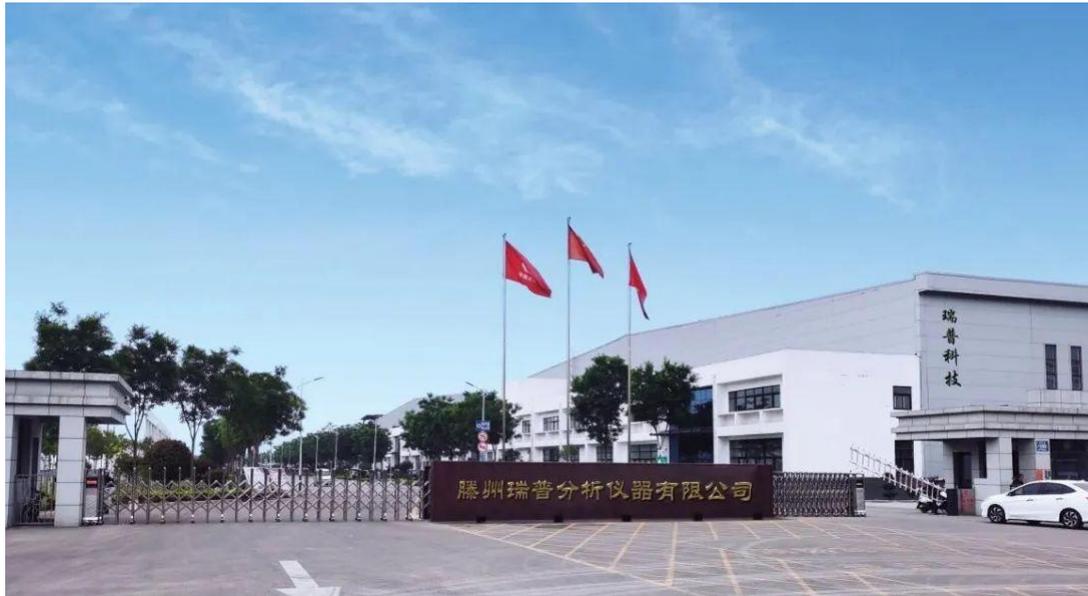

产品推荐

气相色谱仪系列



GC-7890 型气相色谱仪

GC-7890 型气相色谱仪

- 1、电路集成度高，高精度，多功能
- 2、大屏幕液晶中、英文显示，中英文显示可自由切换
- 3、屏幕全自动指示故障原因
- 4、后开门采用光电开关无触点设计，可靠耐用
- 5、独特汽化室设计，死体积更小

GC-8890 型气相色谱仪



- 1、气路均采用采用自动电子流量控制（EFC）和电子压力控制（EPC）
- 2、彩色液晶中英文显示，触摸屏按键，全数字化参数操作；界面显示实时数据，让您随时掌控 GC 关键部件的状态
- 3、复杂样品（C8-C40）的保留时间 $RSD \leq 0.05\%$ 。
- 4、具有完整的审计追踪，用户权限管理、电子签名等功能，使得分析资料、文件均符合 GMP 管理要求
- 5、通过触摸屏、反控工作站可设置、控制仪器所有参数；
- 6、检测器采用对数放大器，无平头峰，保证了含量的准确性

顶空进样器系列

AHS-8890 全自动型顶空进样器



- 1、全中文 7 寸触摸液晶显示，操作简单，一键启动。
- 2、自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能，更换样品瓶等实现流程全自动化。
- 3、可预置 32 个样品，极大提高了时间利用率
- 4、可同时加热样品：1 位、2 位或 3 位
- 5、所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路，无残留
- 6、重复性： $RSD \leq 1.5\%$
- 7、屏幕实时动态显示工作状态、方法参数设置、运行倒计时等

HS-7890 自动型顶空进样器



- 1、采用六通阀定量环压力平衡进样技术，顶空进样峰形窄、重复性好
- 2、可存储 100 种方法，随时调用，实现了快速启动与分析
- 3、可连接国内外所有型号的 GC 进样口，实现了最大的灵活性。
- 4、样品传输管和进样阀有自动反吹功能，进样后自动反吹清洗
- 5、样品瓶也可依次或者同时加热，缩短检测时间
- 6、金属体加热控温，控温精度高、梯度小

燃气分析仪系列

应用领域：

LNG CNG 加气站、油田气、煤层气、矿井气、页岩气、燃气管道运输公司、燃气运输公司、燃气储备站、煤改气企业、LNG 点供、燃气具生产企业、石油炼化、焦化厂、冶炼厂和供气站等众多行业。

GC-5890 燃气分析仪（PC 一体机）



- 1、内置 12 寸工控电脑，屏幕上显示分析报告
- 2、可随时随地进行分析检测，为客户提供稳定和便捷的操作体验
- 3、将高纯氢气发生器，工业级电脑、分析仪、色谱工作站完美结合，只需一台仪器就可完成整个分析，检测过程更简单化
- 4、需按一下遥控按钮就可实现从谱图采集到打印分析报告的全过程



GC-1890 燃气分析仪

- 1、采用 TCD 检测器，H₂ 做载气，六通阀进样，一键自动采集信号

- 2、自动记忆运行参数，开机即可检测
- 3、自动产气系统和气相色谱仪合为一体，操作方便
- 4、体积小，外形美观流畅


气体发生器系列

DH-300 型高纯氢气发生器



- 1、储液、制氢、排氧可同时进行，其电解面积大、池温低、性能好、纯度更高之优点
- 2、设有不返液装置，可有效的确保仪器无返液现象。
- 3、气路部分全部采用不锈钢管，电解抛光，超音清洗，设有过压保护装置，两级净化
- 4、操作简便，只需启动电源开关既可产气，输出流量稳定
- 5、一次配制电解质，日常使用只需补充蒸馏水即可。
- 6、高效节能，采用先进的开关电源，可提高电解效率

RA-2000 型纯净空气发生器

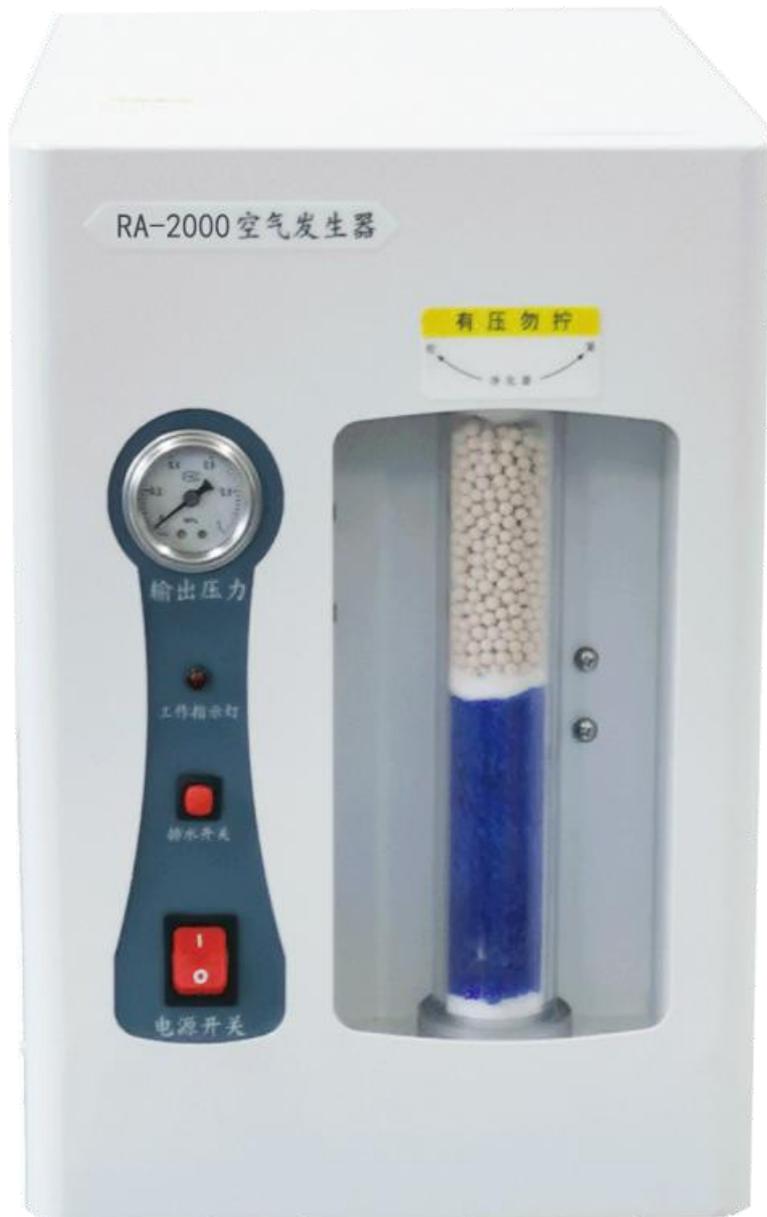

- 1、本仪器具有二次过压保护装置和过温自控装置，当气体压力超过设定值或压缩机机壳温升达到 80°C 时，自控系统会自动关闭电源，保证系统安全可靠；
- 2、仪器带有常压启动装置，延长了压缩机寿命；
- 3、本仪器的气体净化系统使用变色硅胶、13X 分子筛和活性炭，能有效的去除空气中的杂质和水分，保证输出气体的纯净度；
- 4、气路系统采用双级稳压提高了气源的稳定性；
- 5、仪器还设有自动排水阀，可减少罐内积水。

滕州瑞普分析仪器有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会
暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「A26」洽谈、合作

联系方式

滕州瑞普分析仪器有限公司

匠心制造中国好色谱

厂址：山东省滕州市鲁班大道新华西路鑫泰工业区

电话：0632-5509869

网址：www.sdruiyu.cn

QQ:105781255

E-mail: sdrpyq@163.com



参观预登记小程序

